



Termékinformáció magyar





RÉTEGZETT ESZTÉTIKA – MONOLITIKUS ERŐSSÉG

Jensen Dental jelenleg 2 féle MiYO* folyékony kerámia rendszert ajánl: MiYO a fogakhoz, és MiYO pink Gingival System a gingiva kialakításához. Mindkettő rendszer egy egyedülálló megoldása a fogpótlások befejezésének, amelyek magukban foglalják többek között az opaleszcens pasztákat és fluorszcens réteganyagokat, amelyek kiválóan alkalmasak színezéshez, struktúrákhoz és glazúrozáshoz. MiYO rendszerrel könnyedén és gyorsan elérhetőek a magas esztétikai végeredmények, amelyek vetekednek a rétegkerámiák esztétikájával.

MiYO Color különböző típusú ön-glazúrozó színekből áll, amelyek különböznek transzlucencia értékeikben. Minden egyes szín hűen tükrözi a természetes fogak és szövetek színét és felszínét mint pl.: incizális transzlucencia, mamelonok, repedések, halo effektus és a gingivális szövetek.

Közvetlenül a MiYO Color-ra helyezük a MiYO Structure-t. A MiYO Structure segítségével kialakítható a mélység, vitalitás és textúra akár már 0,1 mm - 0,2 mm rétegvastagságban. A magas stabilitásnak köszönhetően, az egyénre jellemző felszíni struktúrák könnyedén kialakíthatóak a pasztából egy ecset segítségével.

Az alacsony égetési hőmérséklet nem változtatja meg a felszín karakterét, ennek köszönhetően megbízható végeredményeket lehet elérni akár már 1 vagy 2 égetés után is.

*Szabadalmaztatás alatt

A MIYO ELŐNYEI:

- + Minden alkalommal kiszámítható végeredmény.
- + Könnyen kezelhető paszta állagú anyagok.
- + A gyors munkafolyamatnak köszönhetően gazdaságos és nagy az időmegtakarítás.
- + A mélység és a kontrasztok kialakításához a MiYO Color-nak tökéletes a fluoreszcencia és opacitás értéke.
- + MiYO Structure – egyedülálló, a felszíni struktúra létrehozásához kialakított anyag.
- + MiYO Structure természetes törésmutatója jól látható a monolitikus koronákon már akár 0,1 mm rétegvastagságban is.
- + Magas színstabilitás.
- + Minimális zsugorodás.
- + Részletgazdag esztétikai végeredmények már az égetés előtt a formák, felszínek és struktúrák kialakításával

MIYO-T KIVÁLTKÉPP A KÖVETKEZŐKHOZ TERVEZTÉK:

- + Monolitikus Cirkon
- + Cirkon - dioxid
- + PFC (pl. InSync Zr)
- + Press to Cirkon
- + Lítium - diszilikát
- + PFM (pl. InSync MC)

MIYO PINK-ET KIVÁLTKÉPP A KÖVETKEZŐKHOZ TERVEZTÉK:


- + Monolitikus Cirkon
- + Cirkon - dioxid
- + PFC (pl. InSync Zr)
- + Press to Cirkon
- + Lítium - diszilikát
- + PFM (pl. InSync MC)



1 MiYO COLOR



Az alapokhoz képest kialakíthatóak különböző formák, színek és effekthatások is.

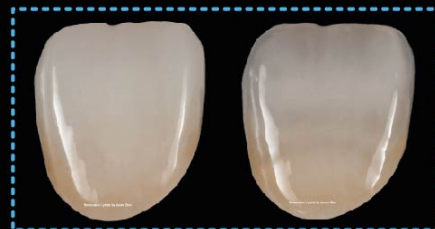

A magastól az alacsony Value értékig köszönhetően a MiYO Color Storm és Smoke anyagoknak.



A MiYO Color Lumin segítségével A3 színből akár A1 szint is kialakíthatunk.

2 MiYO STRUCTURE



Felszíni struktúra kialakítása.



Égetés előtt



Égetés után



1 MiYO PINK COLOR




Restoration | photo by James Choi

Végtelen lehetőségek a részletgazdag munkához.



MiYO Pink Structure segítségével kialakított természetesnek ható műíny.



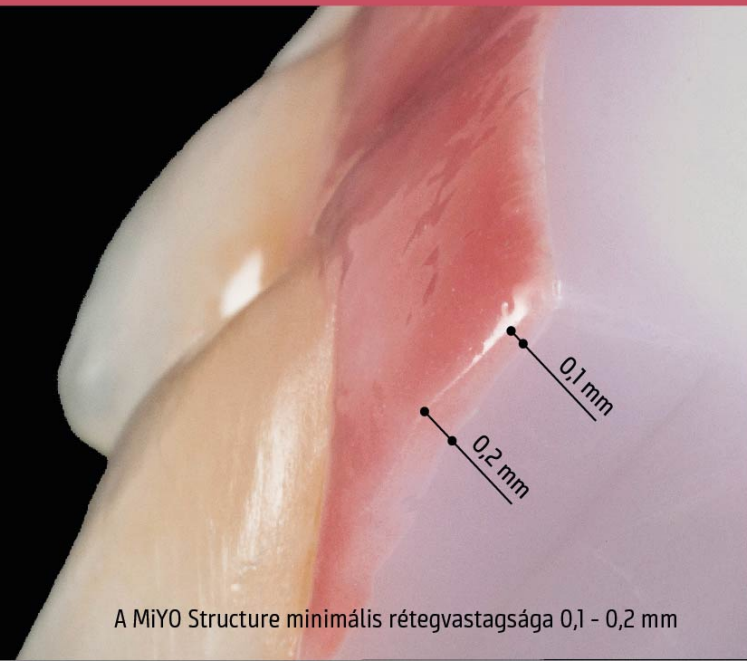

























2 MiYO PINK STRUCTURE


















A MiYO Structure minimális rétegvastagsága 0,1 - 0,2 mm



A MIYO RENDSZER ELEMEI:

TRANSLUCENT		COLOR		STRUCTURE	
	Trans Shade A		Snow		Structure Window
	Trans Shade B		Linen		Structure Ghost
	Trans Shade C		Fissure		Structure Enamel
	Trans Shade D	MAMELON			Structure Ice
	Trans Straw		Mamelon Wheat		Structure Blush
	Trans Sage NEW		Mamelon Coral		
	Trans Lotus		Mamelon Pumpkin		Glaze Paste
	Trans Clementine	HALO			InSync Liquid - one for all -
	Trans Storm		Halo Spring		
	Trans Cobalt NEW		Halo Autumn		
	Trans Lumin				
	Trans Lumin plus NEW				
	Trans Smoke				
	Trans Slate NEW				

A MIYO PINK RENDSZER ELEMEI:

TRANSLUCENT		COLOR		STRUCTURE	
	Trans Raspberry		Flamingo		Structure Orchid
	Trans Copper		Crimson		Structure Rouge
	Trans Midnight		Plum		Structure Frost
			Merlot		
			Sorbet		Glaze Paste
			Salmon		InSync Liquid - one for all -
			Sable NEW		
			Thistle NEW		



TECHNIKAI ADATOK:

	CTE (25-500 °C) [10 ⁻⁶ K ⁻¹]
MiYO Color	7,5 ± 0,5
MiYO Structure	7,4 ± 0,5
Glaze Paste	7,3 ± 0,5

Jensen Dental
50 Stillman Road
North Haven, CT 06473

Phone +1 203 239 2090
www

Európai értékesítés:

Jensen GmbH
Gustav-Werner-Straße 1
72555 Metzingen, Germany

Phone +49 7123 92260
www.jensendental.de

Kizárólagos magyarországi forgalmazó:

DentAvantgArt

D i v i s i o n • K f t .

H - 9400 Sopron, Virágvölgyi u. 59
99/314-931

Web/Shop: www.dentavantgart.hu
E-mail: info@dentavantgart.hu



Készítette:

Chemichl AG
Landstrasse 114
9490 Vaduz, Liechtenstein
info@chemichl.com

